



# SURTRON<sup>®</sup>

## 50D / 80D

ELECTROBISTURI MONOPOLAR

CIRUGIA AMBULATORIAL  
DENTAL  
DERMATOLOGIA  
PRIMEROS AUXILIOS  
CIRUGIA VASCULAR  
VETERINARIA



SURTRON<sup>®</sup> 50D



Alta precisión de corte  
y microcoagulación



## SURTRON® 50D SURTRON® 80D

Referencia 10100.051  
 Potencia máxima de corte CUT 50 W – 400 Ω  
 Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1 45 W – 400 Ω  
 Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2 40 W – 400 Ω  
 Potencia máxima de coagulación COAG 40 W – 400 Ω  
 Frecuencia de trabajo 600 kHz  
 Placa paciente - Placa neutra F  
 Entrada alimentación seleccionable 115/230 Vac  
 Frecuencia de alimentación 50-60 Hz  
 Potencia máxima de absorción 200 VA  
 Dimensiones (L-A-P) 190x85x239  
 Peso 2,5 Kgs

Referencia 10100.081  
 Potencia máxima de corte CUT 80 W – 400 Ω  
 Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1 60 W – 400 Ω  
 Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2 50 W – 400 Ω  
 Potencia máxima de coagulación COAG 20 W – 600 Ω  
 Frecuencia de trabajo 700 kHz  
 Placa paciente - Placa neutra F  
 Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac  
 Frecuencia de alimentación 50-60 Hz  
 Potencia máxima de absorción 220 VA  
 Dimensiones (L-A-P) 190x85x239  
 Peso 2,5 Kgs



# TRON

Alta seguridad  
en el desarrollo  
de la cirugía



Compacto,  
ergonómico y  
de fácil uso



## SURTRON® 50 D

SURTRON 50 D es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para la pequeña cirugía monopolar. Seleccionando sus funciones se obtienen corte puro (CUT), corte y coagulación (CUT1 - CUT2) y coagulación pura (COAG). El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital el cual nos garantiza una alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición. SURTRON 50 D ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

## SURTRON® 80 D

SURTRON 80 D es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para la pequeña cirugía monopolar. Dispone de corte (CUT), corte y coagulación (BLEND), coagulación (COAG) y micro-coagulación (MICRO). El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital el cual nos garantiza una alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición. SURTRON 80 D ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

### NORMAS

EN60601-1  
EN60601-1-2  
EN60601-2-2  
Electrical Class  
MDD 93/42/EC Class:

### CONTROLES



Placa/Paciente (80D)  
Control de salida de potencia  
Autochequeo

# LED SpA



PROGETTAZIONI E PRODUZIONI ELETTRONICHE

via Selciatella, 40 - 04011 Aprilia(LT) - Italy  
[www.led.it](http://www.led.it) - [info@led.it](mailto:info@led.it) - [www.surtron.com](http://www.surtron.com)

## Dimensiones SURTRON 50 D - mm

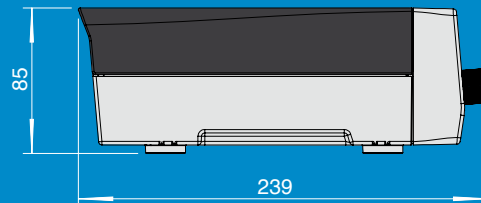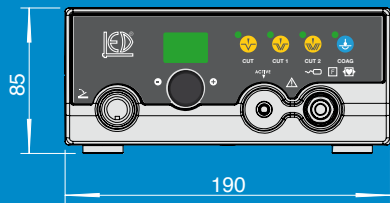

## Dimensiones SURTRON 80 D - mm

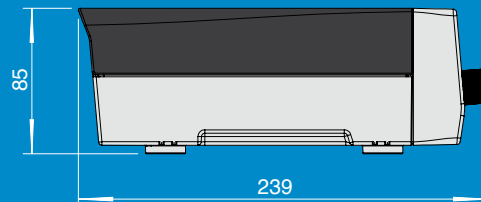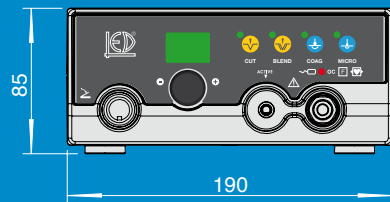

## Composición Estándar:

- Mango monopolar riutilizable F4814
- Diferentes electrodos (10 ud) 00500.00
- Cable de electrodo neutro a soborno 00404.02
- Electrodo neutro a soborno 00403.01
- Pedal de pie 00300.00
- Cable alimentación 2 metros 00100.03



## Composición Estándar:

- Mango monopolar riutilizable F4814
- Diferentes electrodos (10 ud) 00500.00
- Cable de electrodo neutro 00404.08
- Electrodo neutro 5365
- Pedal de pie 00300.00
- Cable de alimentación 2 metros 00100.03

